

施設のあらゆる箇所の感染対策をお手軽チェック！

お客様や従業員への安心を「見える化」！


- ・新型コロナウイルスの消毒効果を確認をしたい。
- ・定期的な検査実施により、より安全なことを対外的にPRしたい。
- ・消毒効果の確認により、お客様や従業員の不安を解消したい。



01 ふき取りキットで好きな場所を検査！

- ①職場内で手を触れる場所、飛沫が発生する場所等の汚染確認
- ②飲食店や医療機関など、不特定多数の人が集まる場所
- ③コロナ発生後の消毒効果の確認

例えば→ドアノブ、手すり、テーブル、椅子、押しボタン、電気スイッチ、スマホ・タブレット端末・マウス等のモバイル製品、飛沫防止の亚克力板、エアコン・空気清浄機、排気口など

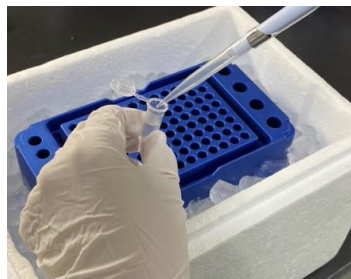

02 ふき取った検体を当社に送付！

ふき取りキットは当社から全国に発送いたします！
マニュアル付きで簡単採取！

- ・本検査は、一般家庭を除く、飲食店等の商業施設、宿泊施設、医療・介護施設、各種学校や消毒会社等の事業所のお客様を対象とさせていただきます。
- ・本検査は環境（設備・物品等に付着するウイルス）確認専用の検査です。人や動物の検査（感染確認など医療目的）に使用することはできません。ご了承ください。
- ・ふき取り操作はお客様実施となります。

03 3営業日以内に検査結果を発送！

*ふき取りキットは変更になる可能性があります。



サービス内容

検出方法 病原体検出マニュアル 2019-nCoV Ver.2.9.1(国立感染症研究所)に準拠
リアルタイム one-step RT-PCR法(TaqManプローブ)

価格
～13,800円(税別)/検体
最新の価格情報は弊社HPでご確認ください。
※検体到着後、3営業日以内に報告書を発送いたします。
※検体数によって価格や納期はご相談させていただきます。

※継続的な検査をご希望の場合は、定期検査、年間契約等もご検討下さい。

ご依頼の流れ

①お問い合わせ

まずはお電話、メール、FAXでお問い合わせください。
ご依頼の内容に基づいてご案内させていただきます。

☎ : 0774-41-0204 FAX : 0774-95-6510

✉ : dna_assay@ctiers.co.jp

②ご依頼（内容確認）

お問い合わせ時に依頼書を送付いただいても結構です。
依頼書は下記URLおよびQRコードからもDL出来ます。

③お支払い

④ふき取りキットの送付




取り扱い説明書も同封します。

⑤ふき取り

⑥キット返送

到着後3営業日以内に報告書発送！

⑦結果報告

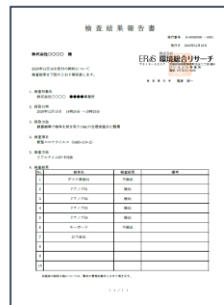

○免責事項

- ・本検査は、生活環境中の新型コロナウイルスを検査するものであり、医療目的では利用できません。
 - ・検査結果が「不検出」の場合でも、新型コロナウイルスが完全に存在しないと示すものではありません。
- ※詳細は依頼書に付属するコロナふき取り検査受託約款をご確認ください。

コロナ以外のPCR分析についてもお気軽にお問い合わせください！

コロナふき取り検査 依頼書

お客様情報	会社名など	会社名：株式会社 ○○○○ 部署名：総務部	ご担当：検査 太郎
	住所など	住所：〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台二丁目○-○	
		TEL：0774-41-○○○○	FAX：0774-95-○○○○
		e-mail：kensa@○○○○.co.jp	
	報告書宛名	☒ 貴社 ☐ 貴社以外（ ）	
	報告書送付先	☒ 上記住所 ☐ 上記住所以外（ ）	
報告書形式	☒ 検査対象一括 報告書は検査対象一括形式が基本となります。 ☐ 検体別 検体別に作成をご希望の場合は1検体毎に500円追加となります。 報告書の発行は各1部となります。2部以上ご希望の方は別途ご相談下さい。		

検体の情報をご記入ください【必須】

●検査対象名（検査の対象となる事業所等の名称）				(株) ○○○○ ●●●●事業所			
	●検体名	●採取日時	●備考		●検体名	●採取日時	●備考
①	デスク表面01	12/15 15:00		⑪			
②	ドアノブ01	12/15 15:10		⑫			
③	ドアノブ02	12/15 14:20		⑬			
④	ドアノブ03	12/15 14:22		⑭			
⑤	ドアノブ04	12/15 15:25		⑮			
⑥	キーボード	12/15 15:05	感染者使用	⑯			
⑦				⑰			
⑧				⑱			
⑨				⑲			
⑩				⑳			
※ 検体は本書を同封し冷蔵でお送りください。 ※ 着日は土日祝をお避けください。 ※ 採取場所付近での新型コロナウイルス感染者の発生歴などの情報がございましたら備考欄にご記入ください。							

必ずご同意のチェックをお願いいたします。【必須】

☒ 上記検体は人体や動物由来の検体ではありません。 ☒ 医療目的の利用ではありません。	
●免責事項 ・コロナふき取り検査受託約款をご確認ください。	●検査代金お振込先 振込手数料は、お客様のご負担となります。 京都銀行宇治支店 普通預金 口座番号 441543 三菱東京UFJ銀行大阪営業部 普通預金 口座番号 12012 口座名 株式会社環境総合リサーチ

検体	〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9
発送先	株式会社環境総合リサーチ (TEL: 0774-41-0204, FAX: 0774-95-6510, email: dna_assay@ctiers.co.jp)

弊社記入欄						受付日/物件番号/担当
お見積 金額	(検体数 + 個別報告書) × 単価 (円) = 合計金額 (税抜き)					
	(6 + 0) × 13,800 = ¥82,800					

コロナふき取り検査 依頼書

お 客 様 情 報	会社名など	会社名：				
		部署名：		ご担当：	印	
	住所など	住所：				
		TEL：		FAX：		
		e-mail：				
	報告書宛名	☐ 貴社 ☐ 貴社以外（	）			
	報告書送付先	☐ 上記住所 ☐ 上記住所以外（	）			
報告書形式	☐ 検査対象一括 ☐ 検体別	報告書は検査対象一括形式が基本となります。 検体別に作成をご希望の場合は1検体毎に500円追加となります。 報告書の発行は各1部となります。2部以上ご希望の方は別途ご相談下さい。				

検体の情報をご記入ください【必須】

●検査対象名（検査の対象となる事業所等の名称）							
	●検体名	●採取日時	●備考		●検体名	●採取日時	●備考
①				⑪			
②				⑫			
③				⑬			
④				⑭			
⑤				⑮			
⑥				⑯			
⑦				⑰			
⑧				⑱			
⑨				⑲			
⑩				⑳			

※ 検体は本書を同封し冷蔵でお送りください。

※ 着日は土日祝をお避けください。

※ 採取場所付近での新型コロナウイルス感染者の発生歴などの情報がございましたら備考欄にご記入ください。

必ずご同意のチェックをお願いいたします。 **【必須】**

☐ 上記検体は人体や動物由来の検体ではありません。	
☐ 医療目的の利用ではありません。	
●免責事項 ・コロナふき取り検査受託約款をご確認ください。	●検査代金お振込先 振込手数料は、お客様のご負担となります。 京都銀行宇治支店 普通預金 口座番号 441543 三菱東京UFJ銀行大阪営業部 普通預金 口座番号 12012 口座名 株式会社環境総合リサーチ

検体 発送先	〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9 株式会社環境総合リサーチ (TEL: 0774-41-0204, FAX: 0774-95-6510, email: dna_assay@ctiers.co.jp)				
弊社記入欄					受付日/物件番号/担当
お見積 金額	(検体数	+	個別報告書) × 単価 (円)	= 合計金額 (税抜き)	
	(	+	) ×	=	

新型コロナウイルス(COVID-19) ふき取りマニュアル Ver1.0.0

本検査キットは環境中からの新型コロナウイルス検出用であり、生体試料には対応していません。

(1)	検査キットの中身を確認！ 変質の可能性がありますので、直射日光・高温下での保管は避けてください。 ○内容物 ・スワブ×検体分 ・チャック袋 ・ねじ口チューブ（青蓋） ・検体シール ・検査依頼書（コピー） ・使い捨て手袋 ・宅配伝票(宛先記入済み) ・ふき取りマニュアル（本書）							
(2)	付属のシールに検体名を記入 検体情報を依頼書にも記入 検体番号（右図 No.欄）は依頼書と同じ番号を記入願います。	<table border="1"><tr><td>日時</td><td>No.</td></tr><tr><td>場所</td><td></td></tr><tr><td>対象</td><td>有効期限等が記入済み</td></tr></table> 日時、検体番号、検体名の記入をお願いします。	日時	No.	場所		対象	有効期限等が記入済み
日時	No.							
場所								
対象	有効期限等が記入済み							
(3)	ふき取りたい場所の付近でキャップを開け、内壁面で液を切る。（生理食塩水なので人体に害はありませんが、乾燥すると結晶化する場合があります。）	スワブの使用写真 						
(4)	ふき取りたい場所を確認し、スワブの綿球全体を使って<u>まんべんなく</u>ふき取ってください。 <よりよいふき取りの方法> ふき取り対象区画(30cm×30cm程度)を設定し、等間隔に縦10回、横10回、斜め5回、逆斜め5回をふき取ってください。 必要に応じて使い捨て手袋をご使用ください。	ふき取り例 						

(5)	ふき取ったスワブを容器に戻してしっかりキャップを閉める。 その後、サンプル名を記入したシールを貼りつけ、ねじ口チューブに入れ しっかり蓋を閉める。	
(6)	ねじ口チューブごと検体送付用チャック袋に入れて口を閉じます・	
(7)	検査依頼書のコピーに採取日時を記入してください。 検体名などに変更がある場合は変更をお願いいたします。	
(8)	ふき取り後は、速やかに、必ず検査依頼書を同封して冷蔵便で当社宛てに発送してください。 宅配業者の指定はございませんがよろしければ同封の送り状をご利用ください。送料はお客様のご負担をお願いいたします。 ※ふき取り後48時間以内に当社に到着するよう手配をお願いいたします。土日祝は受け取りできませんので、平日着でお願いいたします。	

本マニュアルは今後変更される可能性があります。

コロナふき取り検査料金表

検体数 (1回のご依頼)		定価 (税抜き) (1検体あたり)	備考
1検体以上	5検体未満	¥13,800	・ 証明書は1回あたりご依頼をまとめて作成します (費用に含みます)。 ・ 検体毎に証明書が必要な場合は、500円/検体を申し受けます。 ・ 定期検査、年間契約等をご希望の場合、別途ご相談を承ります。 ・ この検査料金表は変更になる可能性がありますので、都度ご確認下さい。
5検体以上	10検体未満	¥12,800	
10検体以上	30検体未満	¥11,800	
30検体以上		¥10,000	

当社が、環境中のコロナふき取り検査（以下「コロナふき取り検査」といいます。）を受託するにあたっては、お客様に以下の約款（以下「本約款」といいます。）にご同意いただきます。つきましては、本約款をよくお読みになったうえでコロナふき取り検査依頼書をご送付ください。当社は、お客様がコロナふき取り検査依頼書を当社に送付されたときは、お客様が本約款にご同意いただけたものとさせていただきます。

【コロナふき取り検査受託約款】

- ・コロナふき取り検査は環境（設備・物品）に付着するウイルス確認専用の検査です。人や動物の感染確認のための検査は受け出来ません。
- ・コロナふき取り検査契約は、当社がコロナふき取り検査依頼書を受領した後、コロナふき取りキットをお客様に送付した時に成立いたします。お客様は、コロナふき取りキットに同梱されたマニュアルに従って正しく採取された検体および検体に関する情報をマニュアルに従って当社に送付してください。
- ・お客様が送付された検体または開示された情報を当社が受領するまでの間に発生した検体または情報の滅失、毀損、品質変化等には、当社は一切の責任を負いません。
- ・ご送付いただいた検体は検査完了後、検査結果のお知らせの送付後に廃棄させていただきます。
- ・代金につきましては、振込手数料をお客様ご負担の上で、当社指定の口座にお振込みください。入金を確認いたしましたら、コロナふき取りキットを送付いたします。
- ・運送時のウイルス拡散等防止の為、コロナふき取りキットの専用容器以外での検体の受け入れはお断りいたします。
- ・当社からのコロナふき取りキット送付後は、検査のキャンセルは可能ですが、送付したキットは使用できないため、代金の返金はできません。
- ・検査状況や検体数によって納期が異なる場合がございます。
- ・当社は、お客様からご同意をいただいたときを除き、ご提供いただいた検体および開示された情報をコロナふき取り検査以外に使用いたしません。ただし、法令の定めまたは権限を有する行政機関等の要請による場合は、お客様のご同意を得ることなく開示することがございます。
- ・天災地変その他やむを得ない理由により、コロナふき取り検査の実施が不可能となった場合には、当社はお客様にその旨を通知し、コロナふき取り検査契約を取り消すことがございます。この場合、コロナふき取り検査の終了にともなう代金、ご送付いただいた検体および開示された情報の取り扱いについてはお客様と協議のうえで決定いたします。
- ・ふき取りにおける夾雑物等の影響により、正確性が低下する可能性がございます。
- ・コロナふき取り検査は、あくまでもご送付いただいた検体についての検査であり、「不検出」であっても新型コロナウイルス（COVID-19）が存在しないことを証明するものではありません。
- ・コロナふき取り検査は、環境中の SARS-CoV-2 遺伝子の存在を分析するPCR検査となります。コロナふき取り検査ではウイルスの活性状態は判断できませんので、検査結果が「検出」の場合であっても、直ちに感染性のあるウイルスが存在することを示す訳ではございません。
- ・報告書記載のコメントおよび判定については、あくまで当社の基準によるものであり、公的な見解ではございません。その旨ご理解いただき、お客様ご自身の責任で報告書をご使用ください。
- ・当社は、送付された検体の受領後から、検査結果の確定についてののみ責任を負い、その使用によって、お客様に直接または間接に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。
- ・本約款は、変更が必要な合理的な理由があるときは、当社ホームページ等において周知した後に変更することがあります。

以上